

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Акупунктурная массажная ручка
QiZen с цифровым дисплеем



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности 3

2. Об устройстве 3


3. Использование 3

4. Проблемы и их решения 4

1. Техника безопасности

- Не использовать одновременно с имплантируемыми электронными устройствами, такими как искусственное сердце, легкие и другие электронные медицинские приборы;
- Запрещено использование беременным женщинам, женщинам в период менструации, людям с кожными заболеваниями, пациентам с острой лихорадкой и другими подобными состояниями;
- Запрещено использование пациентам с тяжёлыми и экстренными состояниями, включая онкологических больных.

2. Об устройстве

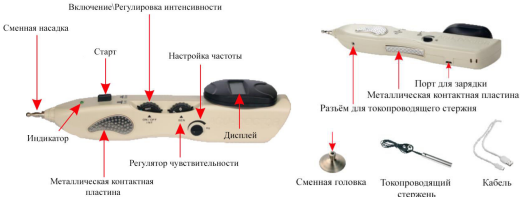

3. Использование

Сначала включите ручку «Вкл./Регулировка интенсивности», затем поверните ручку «Регулировка чувствительности» на уровень 2, чтобы во время обнаружения устройство издавало около двух звуковых сигналов в секунду. Частоту и интенсивность следует настраивать. Регулировка чувствительности может различаться у разных людей в зависимости от типа кожи, а также уровня сухости или влажности воздуха. Перед использованием вставьте провод токопроводящего стержня в разъём, расположенный в нижней части основного блока, и возьмите контактный стержень другой рукой — для замыкания электрической цепи.



Держите устройство как ручку — большим пальцем прикасайтесь к металлической контактной пластине 1, а межпальцевой областью (между большим и указательным пальцем) — к металлической контактной пластине. Удерживайте устройство вертикально и прикасайтесь им к коже.




Доступно 10 уровней интенсивности воздействия (от 0 до 10).



После завершения процедуры переведите ручку «Вкл./Интенсивность» в положение «Выкл.».

Во время зарядки загорается зелёный индикатор, при этом прибор должен быть выключен. После полной зарядки зелёный индикатор гаснет.

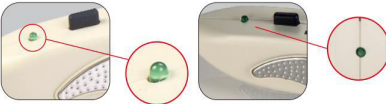

Устройство можно использовать 1–2 раза в день, при этом воздействие на одну и ту же зону должно составлять от 3 до 5 минут за одну процедуру.

Чистка прибора:
Протрите поверхность влажным полотенцем;
Загрязнения на поверхности насадки удаляйте мягкой тканью.
Для предотвращения перекрёстного инфицирования рекомендуется очищать насадку спиртовыми салфетками перед использованием другими лицами.

4. Проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Рекомендуемое решение
Быстрые звуковые сигналы	Слишком высокая чувствительность	Отрегулируйте ручку «Чувствительность» до уровня около 2 (примерно 2 сигнала в секунду)
Нет ощущения массажа	Кнопка начала лечения не нажата и не удерживается	Нажмите и удерживайте кнопку лечения на протяжении всей процедуры, иначе устройство вернётся в режим обнаружения
Нет ощущения массажа	Неправильная регулировка ручки «Вкл./Интенсивность»	Отрегулируйте ручку «Вкл./Интенсивность» для увеличения интенсивности
Отсутствие эффекта от терапии	Слишком низкая частота биоэлектрических импульсов	Увеличьте частоту импульсов
Уровень заряда аккумулятора низкий	Аккумулятор разряжен	Подзарядите устройство

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код, приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Contact WhatsApp



Приятного использования!